

## loeki 2.



### **Gebruiksaanwijzing.**

**loeki 2.** - de verrijdbare meegroeïende eet-/werkstoel.



**Hartelijk dank.**



**Geachte cliënte, geachte cliënt,**

Wij willen u hartelijk danken voor het in ons gestelde vertrouwen en voor de aanschaf van ons product. Wij willen u vragen, om de gebruiksaanwijzing voor de eerste ingebruikname van het product aandachtig door te lezen en in acht te nemen.

Gelieve er rekening mee te houden dat instructies en afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing door de uitvoering van uw product kunnen afwijken.

Technische wijzigingen behouden wij ons voor.

**Belangrijke informatie!**

Zorg ervoor, dat deze gebruiksaanwijzing bij het product blijft.

Uw **Schuchmann** team



<b>1. Voorbereiding. ....</b>	<b>05</b>
1.1 Uitlevering.....	05
1.2 Veiligheidsmaatregelen voor het gebruik.....	05
1.3 Veilig verwijderen.....	05
1.3.1 Product.....	05
1.4 Opbergplaats van de gebruiksaanwijzing.....	05
<b>2. Productbeschrijving. ....</b>	<b>06</b>
2.1 Materiaalinformatie.....	06
2.2 Handling/transport.....	06
2.3 Toepassingsgebieden, gebruik conform de voorschriften.....	06
2.4 Oneigenlijk gebruik / Waarschuwinginstructies.....	07
2.5 Uitrusting basismodel.....	07
2.6 Lijst met toebehoren.....	08
2.7 Productoverzicht.....	08
<b>3. Instellingen. ....</b>	<b>09</b>
3.1 Zithoogte.....	09
3.2 Zithoek.....	10
3.3 Zitdiepte.....	10
3.4 Rughoek.....	10
3.5 Rughoogte.....	11
3.6 Armleuningen.....	11
3.7 Voetenplank.....	12
3.8 Voetensteunen.....	13
3.8.1 Positioneren van de voetensteunen.....	14
3.9 Zwenkwielen.....	15
<b>4. Toebehoren. ....</b>	<b>16</b>
4.1 Hoofdsteun.....	16
4.2 Afneembare rug.....	16
4.3 Romppelotten.....	17
4.4 Wegklapbare romppelotten.....	17
4.5 Centrale beremming.....	17
4.6 Dijbeensteunen.....	18
4.7 Abductie instelling.....	18
4.8 Instelbare bekkengeleider.....	19
4.9 Werkblad.....	19
4.10 Abductieklos.....	20
4.11 Frame verlengers.....	20
<b>5. Reinigen en inspectie. ....</b>	<b>20</b>
5.1 Reinigen en desinfecteren.....	20



# Inhoud.

5.1.1 Reiniging .....	20
5.1.2 Desinfectie .....	21
5.2 Inspectie .....	21
5.3 Onderhoud .....	21
5.3.1 Aandachtspunten onderhoud .....	21
5.3.2 Onderhoudsplan .....	22
5.4 Reserveonderdelen .....	23
5.5 Gebruiksduur en hergebruik .....	23
<b>6. Technische gegevens. ....</b>	<b>24</b>
<b>7. Garantie. ....</b>	<b>25</b>
<b>8. Identificatie. ....</b>	<b>26</b>
8.1 EG conformiteitsverklaring.....	26
8.2 Serienummer / Productiedatum .....	27
8.3 Productversie .....	27
8.4 Uitgave van het document.....	27
8.5 Naam en adres van de producent, uitleverende dealer.....	27

# 1. Voorbereiding.

## 1.1 Uitlevering

Gelieve het product bij ontvangst op volledigheid en gebreken te controleren en let op eventuele transportschade. Controleer het product in aanwezigheid van de bezorger. Mocht er sprake zijn van transportschade, inventariseer deze dan (vaststelling van de gebreken) in aanwezigheid van de bezorger. Gelieve een schriftelijke reclamatie naar de verantwoordelijke dealer sturen.

## 1.2 Veiligheidsmaatregelen voor het gebruik

Het correcte gebruik van het product vraagt een nauwgezette en zorgvuldige instructie van de gebruiker of de begeleidende persoon. Wij willen u vragen, om de gebruiksaanwijzing voor de eerste ingebruikname van het product aandachtig door te lezen en in acht te nemen. De mogelijkheid bestaat, dat de productonderdelen die met de huid in aanraking kunnen komen, warm kunnen worden door zonnestrallen. Bedek deze plaatsen of bescherm het apparaat tegen direct zonlicht.

## 1.3 Veilig verwijderen

Voor het behoud en ter bescherming van het milieu, het voorkomen van milieuverontreiniging, en om de recycling van grondstoffen te verbeteren, dient u de verwijderingsinstructies in de **punten 1.3.1** in acht te nemen.

### 1.3.1 Product

Voer na verstrijken van de levenscyclus van het product de voor het product gebruikte grondstoffen naar hun aard af voor recycling (zie materiaal informatie onder **punt 2.1**).

## 1.4 Opbergplaats van de gebruiksaanwijzing

Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en zorg ervoor dat deze in geval van een mogelijk hergebruik bij het product blijft. Bij verlies van de gebruiksaanwijzing kan te allen tijde een actuele versie worden gedownload onder [www.schuchmann.de](http://www.schuchmann.de).



## 2. Productbeschrijving.

### 2.1 Materiaalinformatie

Het basisframe alsmede de afzonderlijke elementen zijn van aluminium vervaardigd, corrosievrij en gepoedercoat. De bekleding bestaat voor 100% uit polyester en is brandvertragend (volgens DIN EN 1021-1+2).

### 2.2 Handling/transport

De eet-/werkstoel is niet bedoeld om te worden gedragen, omdat hij van zwenkwielen is voorzien. Mocht het dragen vanwege hindernissen niet vermeden kunnen worden, dan dient u zich ervan te vergewissen dat alle bewegende delen zijn vastgezet. Ga vervolgens naast de eet-/werkstoel staan, pak deze voor en achter onder het zitgedeelte vast en draag hem naar de gewenste plaats. Voor het transporteren van de eet-/werkstoel, stelt u alle instellingen op de meest compacte maat in (voetensteun opklappen, zithoogte in de laagste stand, etc.).



**Zet alle beweegbare onderdelen voor het dragen vast!**



**De gebruiker mag zich tijdens het transport niet in de eet-/werkstoel bevinden!**

### 2.3 Toepassingsgebieden, gebruik conform de voorschriften

De eet-/werkstoel **loeki 2.** is ontworpen voor kinderen en jongeren, die niet vrij kunnen zitten of staan, maar waarvan het zitten in een zitschaal vanwege de beperkte romphouding niet permanent noodzakelijk is. De individueel instelbare zitmaten en ondersteunende pelotten zorgen voor een stabiele en rechte zithouding.

## 2. Productbeschrijving.



### 2.4 Oneigenlijk gebruik / Waarschuwinginstructies

- Let erop dat het product niet door meerdere gebruikers gelijktijdig wordt gebruikt.
- Gebruik de eet-/werkstoel alleen op een vlakke en stabiele ondergrond.
- Gebruik de eet-/werkstoel niet voor het transport van de gebruiker.
- Om de eet-/werkstoel tijdens het transport veilig op te kunnen tillen, gaat u zijdelings naast de eet-/werkstoel staan en pakt u deze voor en achter bij het zitvlak vast. Daarbij moeten alle beweegbare delen zijn vastgezet.
- Laat de gebruiker nooit zonder toezicht in de eet-/werkstoel zitten.
- Het correcte gebruik van de eet-/werkstoel vraagt een nauwgezette en zorgvuldige instructie van de gebruiker of de begeleidende persoon.
- De maximum belasting (zie **punt 6**) mag niet worden overschreden.
- Gebruik de eet-/werkstoel niet met defecte, versleten of ontbrekende onderdelen.
- Omwille van de brandveiligheid mag de eet-/werkstoel niet in de omgeving van een open vuur of een andere sterke warmtebron zoals elektrische of gasverwarming worden geplaatst.
- Gebruik alleen toebehoren en reserveonderdelen van de firma Schuchmann, omdat u anders de veiligheid van de gebruiker in gevaar brengt.
- Gebruik de eet-/werkstoel alleen, als alle componenten correct zijn aangebracht en ingesteld.
- Er dient op gelet te worden dat er zich bij alle in- en afstellingen geen ledematen van de gebruiker of begeleidende persoon in het in- of afstelgebied bevinden, zodat de kans op letsel wordt geminimaliseerd.
- Gebruikers die problemen hebben met zien of lezen moeten zich de gebruiksaanwijzing laten voorlezen om veilig met de eet-/werkstoel om te kunnen gaan.

### 2.5 Uitrusting basismodel

- Incl. armleuningen, voetensteun, schuifgreep, standaard zitkussen met hoes
- Zithoogte instelbaar met gasdrukveerondersteuning (250N bij maat 0 en 1, 350N bij maat 2)
- 4 dubbelberemde zwenkwielen
- Instelmogelijkheden: zithoek (per gasdrukveer 500N), rughoek, zitdiepte en zitbreedte, in hoek, hoogte en breedte verstelbare armleuningen, in hoogte verstelbare rugleuning



## 2. Productbeschrijving.

### 2.6 Lijst met toebehoren

- Hoofdsteen
- Afneembare rug
- Rompelotten (ook wegklapbaar)
- Dijbeensteunen
- Instelbare bekkengeleider
- Werkblad
- Abductieklos
- Frame verlengers
- Gordelmontageset voor het zitgedeelte
- Gordelmontageset voor het ruggedeelte
- Incontinentiecoating
- Fixatiehulpmiddelen
- Centrale beremming

### 2.7 Productoverzicht

De onderstaande afbeelding toont u de benaming van de belangrijkste componenten, evenals de begrippen, die de lezer bij het lezen van de gebruiksaanwijzing tegenkomt.




## 3. Instellingen.

Instellingen en afstellingen van het product mogen alleen maar worden uitgevoerd door mensen die een passende instructie hebben gekregen van een adviseur medische producten. Daarbij dient erop gelet te worden dat er zich bij alle soorten in- en afstellingen geen ledematen van toepasser of gebruiker in het in- of afstelgebied bevinden, zodat de kans op letsel wordt geminimaliseerd.

### 3.1 Zithoogte

De zithoogte wordt met behulp van een gasdrukveer geregeld. Voor het hoger instellen van de zithoogte wordt het voetpedaal (A) op het basisonderstel bediend. Door licht te drukken glijdt de zitunit naar boven. Men laat de zitunit zakken door boven op het zitvlak te drukken onder gelijktijdige bediening van het voetpedaal. De gasdrukveer dient slechts als ondersteuning van de hoogte-instelling. Het voetpedaal kan met de trekspanstift (B) – die u aan de binnenkant van het voetpedaal vindt – tegen ongewilde bediening worden geborgd. Verdraai hiervoor de trekspanstift totdat hij vastklikt. Eventueel kunt u door licht bewegen van het voetpedaal het vastklikken ondersteunen. De vergrendeling wordt ontgrendeld door de trekspanstift eruit te trekken en vervolgens een kwartslag te draaien.

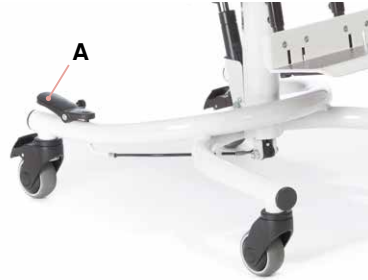

**Let er op, dat er gedurende het instellen/regelen van de zithoogte geen lichaamsdelen (voeten) in het bereik van het instel- / regelmechanisme (tussen vloer en voetensteun van de eet-/werkstoel) terecht komen, om mogelijk letsel te voorkomen!**



## 3. Instellingen.


### 3.2 Zithoek

De hendel voor de zithoekregeling is van een kinderbeveiliging voorzien. Om de hoek van de zitunit te regelen, wordt handgreep **(A)** achteraan de zitschaalopname bediend, door deze horizontaal in elkaar te schuiven totdat hij vastklikt. De zitunit kan nu in de actieve of passieve stand worden ingesteld.



### 3.3 Zitdiepte

Voor het instellen van de zitdiepte draait u de twee vleugelmoeren **(B)** onder de zitunit los. Daarna kan het zitvlak traploos naar voren en achteren worden verschoven.

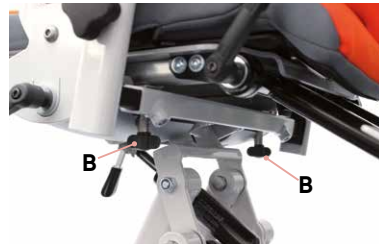

**Draai na iedere instelling alle verstellingen weer vast!**

### 3.4 Rughoek

De rughoek kan na het losdraaien van klemhendel **(C)** op de rechterkant van de zitunit worden ingesteld.



**Let er op, dat bij het regelen / instellen van de rughoek geen lichaamsdelen in het bereik van het instel- / regelmechanisme terechtkomen, om mogelijk letsel te voorkomen.**



## 3. Instellingen.

### 3.5 Rughoogte

Draai cinbusbout (A) met inbusleutel (M8) aan de achterkant los en breng de rug op de gewenste hoogte.




### 3.6 Armleuningen

De armleuningen zijn in lengte, in breedte en (optioneel) in hoek verstelbaar. De hoekinstelling kan plaatsvinden na het losdraaien van sterknop (B). Door het losdraaien van sterknop (C) kan de hoogte worden ingesteld.



De breedte-instelling geschiedt na het losdraaien van beide draadstiften (D), die zich op de onderzijde van de zittunit bevinden.

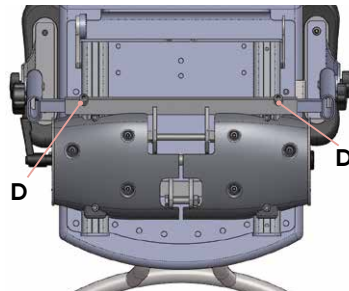


**Draai na iedere instelling alle verstellingen weer vast!**

## 3. Instellingen.

### 3.7 Voetensteun

Het basismodel van eet-/werkstoel **loeki 2** beschikt reeds over een voetensteun **(A)**. Deze beschikt over een antislip oppervlak **(B)** en 8 sleuven **(C)** voor de bevestiging van gordels zoals enkelhuggers of wreefbanjes. Voor het instellen van de kniehoek draait u knevel **(D)** onder het zitvlak los, brengt de voetensteunen in de gewenste positie en draait knevel **(D)** weer vast. De voetensteun kan worden opgeklapt om bijvoorbeeld het instappen te vergemakkelijken **(E)**. Voor een traploze hoogte-instelling draait u de vier draadstiften **(F)** los, brengt de voetensteun in positie en draait de draadstiften **(F)** weer vast. Voor een optimale positionering van de voeten kan ook de enkelhoek worden ingesteld. Klap hiervoor eerst de voetenbank naar boven en draai vervolgens de inbusschroeven **(G)** in of uit. Borg de moeren **(H)** na iedere enkelhoekverstelling.

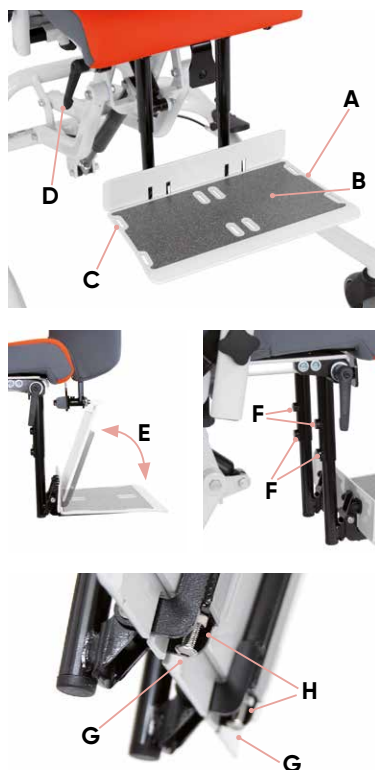

**Borg de moeren (H) na iedere enkelhoekverstelling!**




**Draai na iedere instelling de knevels en draadstiften weer vast!**

## 3. Instellingen.

### 3.8 Voetensteunen

**loeki 2.** kan optioneel ook met voetensteunen (A) worden uitgevoerd. Die beschikken over een antislip oppervlak (B) en elk 4 sleuven (C) voor de bevestiging van gordels zoals enkelhuggers of wreefbanjes. Voor het instellen van de kniehoek draait u knevel (D) onder het zitvlak los, brengt de voetenbank in de gewenste positie en draait knevel (D) weer vast. Om bijvoorbeeld het instappen te vergemakkelijken kunnen de voetensteunen opgeklapt worden (E). Voor een traploze hoogteregeling draait u de beide draadstiften (F) van elke voetensteun los, brengt de voetensteun in positie en draait de draadstiften (F) weer vast.

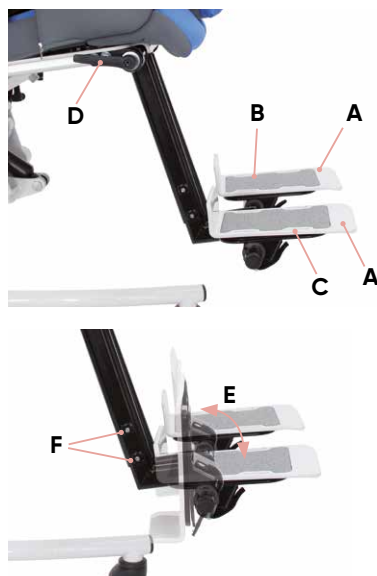

**Draai na iedere instelling de knevels en draadstiften weer vast!**



## 3. Instellingen.

### 3.8.1 Positioneren van de voetensteunen

Voor een optimale positionering van de voeten kunnen de voetensteunen onafhankelijk van elkaar in lengte, in breedte en in hoek worden afgesteld.

#### Enkelhoek

De enkelhoek (A) van de betreffende voetensteun kan worden afgesteld van (-)15° tot 5°. Draai hiervoor de draadstiften (B) onder de voetensteunen in of uit en stel daarmee de gewenste enkelhoek in.

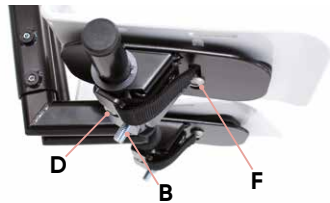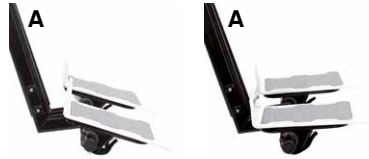

#### Breedte

Voor het instellen van de breedte (C) draait u de inbusbouten (D) onder de voetensteunen los, brengt de voetensteun in de gewenste positie en draait de inbusbouten (D) weer vast.



#### Hoek / diepte

Voor het instellen van de hoek en de diepte (E) draait u de inbusbouten (F) onder de voetensteunen los, brengt de voetensteunen in de gewenste positie en draait de inbusbouten (F) weer vast. Daarnaast kan op deze manier ook een aanvullende breedte-instelling worden gedaan.



#### Beveiliging tegen omhoogklappen

De voetensteunen kunnen tegen ongewenst omhoogklappen worden beveiligd. Maak hier toe de klittenbandsluiting (G) onder de voetensteun los, breng de voetensteun in de gewenste positie en sluit de klittenbandsluiting (G) weer.



**Draai na iedere instelling alle verstellingen weer vast!**

## 3. Instellingen.

### 3.9 Zwenkwielen

Om ongewild wegrollen te voorkomen dient de eet-/ werkstoel door middel van 4 beremde zwenkwielen te worden geblokkeerd. Druk daarvoor met de punt van de voet de remmen **(A)** naar beneden.




**De rem dient alleen voor het voorkomen van ongewild wegrollen op effen vlakken.**

## 4. Toebehoren.

### 4.1 Hoofdsteun

De hoofdsteun is in hoogte, diepte en hoek instelbaar. Draai daarvoor beide inbusbouten (A) met een inbusleutel los en breng de hoofdsteun in de gewenste positie.

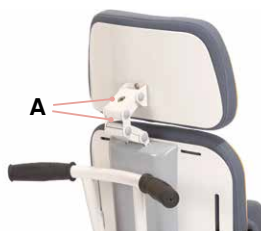

### 4.2 Afneembare rug

De afneembare rug kan aan de achterkant van de eet-/werkstoel worden bediend. Draai daarvoor draaigreep (B) los, druk de vergrendelingshendel (C) samen en verwijder vervolgens de rug.



De functie van de afneembare rug kan in het therapieprogramma worden geïntegreerd en ook kortstondig worden gebruikt, omdat de rug samen met de hoofdsteun snel teruggeplaatst kan worden en de gebruiker bij vermoeidheid steun biedt.



**Draai na iedere instelling alle verstellingen weer vast!**

## 4. Toebehoren.

### 4.3 Rompelotten

De rompelotten kunnen afzonderlijk in hoogte en breedte worden afgesteld. Draai daarvoor beide inbusbouten met inbusleutel (A) los en breng de rompelotten in de gewenste positie.



### 4.4 Wegklapbare rompelotten


De wegklapbare rompelotten kunnen, om makkelijk plaats te kunnen nemen, naar de zijkant worden weggeklapt. Druk daarvoor zijdelings op de rompelotten op de rode drukknop (B) boven het scharnier en draai de rompelot naar opzij weg.



**Let er bij het terugklappen op, dat de rompelot vastklikt!**

### 4.5 Centrale beremming



De centrale beremming kan door de gebruiker zelf worden bediend. Wanneer de hendel (C) naar beneden wordt gedrukt, is de rem gedeblokkeerd. Als de hendel (C) naar boven staat, blokkeert de rem.

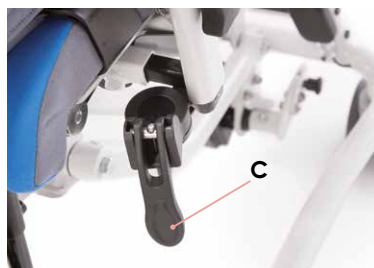

## 4. Toebehoren.

### 4.6 Dijbeensteunen

De kussens van de dijbeensteunen zijn afzonderlijk in te stellen in breedte en diepte. Om de breedte in te stellen draait u de beide vleugelmoeren (A) onder het zitvlak los en brengt u het kussen van de dijbeensteun in de gewenste positie. De diepteregeling is, behalve bij de standaardversie voor maat 0 met instelbare bekkengeleider, bij elke dijbeensteun mogelijk. Voor het instellen van de diepte opent u klittenbandsluitingen (B), draait u de 3 inbusbouten (C) met inbussleutel los en brengt u het kussen in de gewenste positie.

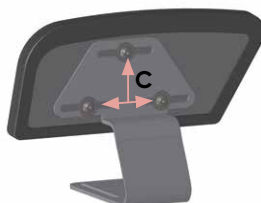
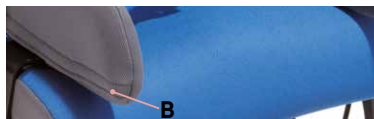


**Draai na iedere instelling de verstellingen weer vast!**

### 4.7 Abductie instelling

Met de abductie instelling is een medisch vereiste abductie van de dijen en compensatie van het zitdieptever-schil mogelijk.




Voor het instellen van de beengeleider draait u beide moeren (D) onder het zitvlak los en brengt u de beengeleider in de gewenste positie. U kunt eenvoudig de abductiehoek (1), de dijbreedte (2) en de beenlengtecompensatie of het zitdieptever-schil (3) met behulp van de slobgaten instellen, terwijl de gebruiker in de eet-/werkstoel zit.

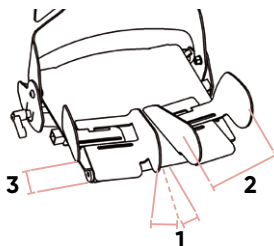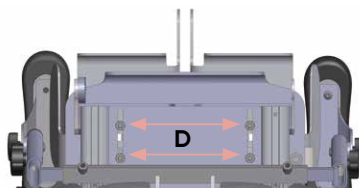

## 4. Toebehoren.

### 4.8 Instelbare bekkengeleider


De instelbare bekkengeleider kan in de breedte worden ingesteld, biedt de gebruiker veel veiligheid en positioneert het bekken. Draai eerst de inbusbout aan de achterkant van de eet-/werkstoel, aan de onderkant van de cover los. Druk vervolgens het kussen voor licht naar beneden en draai inbusbout (A) los. Zet nu de gebruiker in de stoel en breng de instelbare bekkengeleider in de gewenste positie. Draai eerst de inbusbout (B) weer vast en haal dan de gebruiker pas uit de stoel. Nu hoeft u nog maar de inbusbout (A) weer vast te schroeven en dan kunt u de gebruiker weer terug in de stoel zetten.

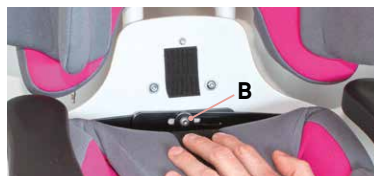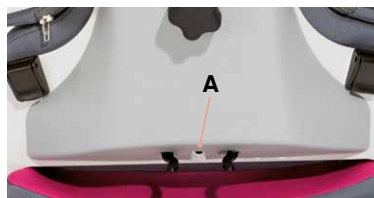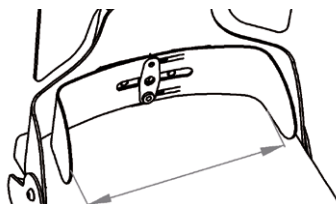

**Draai na iedere instelling de verstellingen weer vast!**

### 4.9 Werkblad

Het werkblad is in hoogte en diepte instelbaar. Het instellen van de hoogte gebeurt met behulp van het instellen van de arMLEUNINGEN (zie **punt 3.6**). Voor het instellen van de diepte draait u vleugelmoer (C) los en brengt u het werkblad in de gewenste positie. Om bijvoorbeeld bij het in- en uitstappen het werkblad naar opzij weg te klappen, draait u vleugelmoeren (C + D), los, draait het werkblad naar boven weg en plaatst u die aan de zijkant van de eet-/werkstoel.

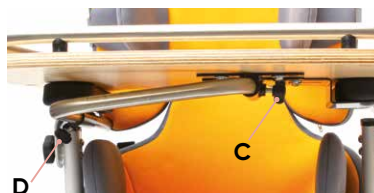

## 4. Toebehoren.

### 4.10 Abductieklos

De abductieklos dient met behulp van een steekas voor op de zitplaat te worden gemonteerd. Druk op de knop op de steekas, zodat de abductieklos eenvoudig kan worden geplaatst of verwijderd. Bij het plaatsen van de abductieklos moet deze met een duidelijke "klik" vastklikken.

### 4.11 Frame verlengers

De frame verlengers is niet instelbaar! Zij dient alleen voor de stabiliteit, met name bij grote zitschalen en bij extreem naar achteren ingestelde zithoek.



**Draai na iedere instelling de verstellingen weer vast!**

## 5. Reinigen en inspectie.


### 5.1 Reinigen en desinfecteren

#### 5.1.1 Reiniging

Reinig alle frame-elementen regelmatig met een spons of vochtige doek, met name waterdruppels moeten worden verwijderd. Bij sterke vervuilingen moet de reiniging met een huishoudelijk schoonmaakmiddel worden uitgevoerd. Het is belangrijk om de gereinigde plaatsen goed droog te maken.

Alle stoffen die niet kunnen worden verwijderd, kunnen met een vochtige doek worden afgeveegd. Let bij alle verwijderbare stoffen op de ingenaaide onderhoudsetiketten (zoals **A+B**) op het betreffende onderdeel.

Neem onze algemene instructies met betrekking tot reiniging en hygiëne in acht. Die vindt u op [www.schuchmann.de/mediathek](http://www.schuchmann.de/mediathek).

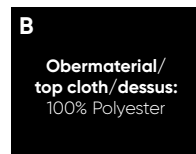

## 5. Reinigen en inspectie.

### 5.1.2 Desinfectie

Voor het desinfecteren van oppervlakken van de metalen en kunststof onderdelen kunnen verschillende producten worden gebruikt.

Vloeibare desinfectiemiddelen zijn er als kant-en-klare-oplossing, die op een zachte doek moet worden gespotten en vervolgens gelijkmatig moet worden aangebracht. Als alternatief kan er ook gebruik worden gemaakt van doekjes die in een desinfectiemiddel zijn gedompeld en waarmee vervolgens de producten grondig worden afgeveegd. In beide gevallen moet erop gelet worden dat het product volledig nat wordt. Desinfectie in volautomatische desinfectie-installaties is ook mogelijk en wordt zelfs aanbevolen.

De inwerktijden kunnen variëren en kunnen uit de specificaties van de fabrikant worden gehaald.

### 5.2 Inspectie

Voer een dagelijkse zichtcontrole uit en controleer het product regelmatig op scheuren, breuken, ontbrekende onderdelen en storingen. Gelieve u bij een defect of een foutieve functie direct aan de uitleverende dealer (zie **8.5**) te wenden.

### 5.3 Onderhoud

Omwille van de veiligheid van de gebruiker en voor het behoud van de productaansprakelijkheid dient er minimaal eenmaal per jaar onderhoud te worden uitgevoerd door de dealer (zie **punt 8.5**). Het uitgevoerde onderhoud dient te worden vastgelegd in het onderhoudsschema (zie **punt 5.3.2**).

#### 5.3.1 Aandachtspunten onderhoud

- Basisreiniging conform specificaties van de fabrikant (zie **punt 5.1.1**)
- Evt. desinfectie conform specificaties van de fabrikant (zie **punt 5.1.2**)
- Beschadigingen aan frame, opties en accessoires (scheuren, breuken, corrosie, verbogen of ontbrekende onderdelen)
- Sterkte van de verbindingen (losse schroeven vastdraaien, ontbrekende schroeven vervangen)
- Werking van de insteелеlementen (schroeven, ontgrendelhendel, voetpedaal)
- Werking van de overige insteелеlementen (glijlagers, rug, hoofdsteun, pelotten, armlenningen, voetensteunen, tafel en geleidingen bij de benen)
- Werking van de gasdrukveren (evt. aanpassing van de Bowden-kabel)
- Eventueel werking van de elektrische hoogte-instelling inclusief bekabeling controleren
- Werking van de beveiligingselementen (kantelbeveiliging)



## 5. Reinigen en inspectie.

- Correcte montage van de zitunit
- Werking van de remmen
- Werking van de zwenkwielen (concentriciteit, lichte loop)
- Controle van de riemen op beschadigingen (klemmen, sluitingen, naden)
- Controle van de kussens en hoezen op beschadigingen
- Leesbaarheid van het typeplaatje
- Afsluitende volledige controle van de werking van het hulpmiddel
- Controle van de correcte bevestiging van alle opties en de bijbehorende accessoires

### 5.3.2 Onderhoudsplan

Aandachtspunten voor het onderhoud van de fabrikant (zie **punt 5.3.1**) werden uitgevoerd:

Datum	Bedrijf	Naam	Handtekening



**Vastgestelde gebreken of beschadigingen moeten voordat het hulpmiddel opnieuw wordt gebruikt zijn verholpen door de dealer of de fabrikant.**

## 5. Reinigen en inspectie.

### 5.4 Reserveonderdelen

Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reserveonderdelen van de firma Schuchmann, omdat u anders de veiligheid van de gebruiker in gevaar brengt en uw recht op garantie verliest.

Voor het bestellen van reserveonderdelen kunt u zich, met opgave van het serienummer van het product, tot uw leverancier wenden (zie **punt 8.5**). De benodigde vervangende onderdelen en accessoires mogen alleen door geschoold personeel worden gemonteerd.

### 5.5 Gebruiksduur en hergebruik

De te verwachten gebruiksduur van ons product bedraagt, afhankelijk van de intensiteit van het gebruik en het aantal keren dat het hergebruikt wordt, tot ca. "8" jaar, als het gebruik plaatsvindt in overeenstemming met de instructies in deze gebruiksaanwijzing. Het product kan na deze periode nog steeds worden gebruikt, wanneer het zich in een veilige staat bevindt. De te verwachten gebruiksduur is niet van toepassing voor delen die aan slijtage onderhevig zijn zoals zwenkwielen, gasdrukveren etc. Het onderhoud en de beoordeling van de staat, en in voorkomende gevallen het hergebruik, is voor de verantwoordelijkheid van de dealer.

Het product is geschikt voor hergebruik. Voer voordat u het product doorgeeft de onder **punt 5.1** genoemde reinigings- en desinfectie-instructies uit. Begeleidende documenten zoals deze gebruiksaanwijzing maken deel uit van het product en moeten aan de nieuwe gebruiker worden doorgegeven. Voor hergebruik hoeft het apparaat niet eerst te worden gedemonteerd. In geval van opslag wordt aangeraden het product in te stellen op zijn meest compacte maten, om ruimte te besparen.




**Wanneer er zich tijdens de gebruikstijd bij beoogd gebruik van het product een ernstig incident voordoet, moet dit onmiddellijk aan de fabrikant en de verantwoordelijke instanties worden gemeld.**



## 6. Technische gegevens.

### Maten basismodel

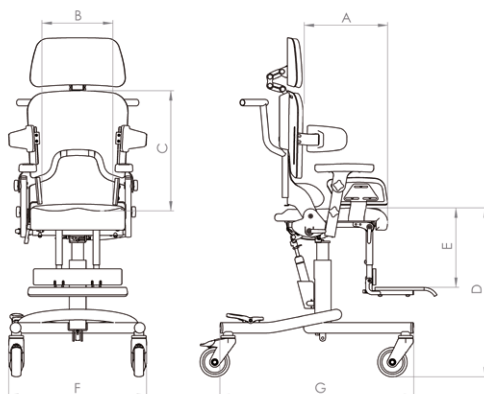

		Mt. 0	Mt. 1	Mt. 1b	Mt. 2
<b>A</b>	Zitdiepte	15-25 cm	21-30 cm	26-36 cm	30-42 cm
<b>B</b>	Zitbreedte	16-26 cm	20-30 cm	20-30 cm	28-38 cm
<b>C</b>	Rughoogte met korte rug	32-37 cm	35-43 cm	42-52 cm	42-52 cm
<b>C</b>	Rughoogte met lange rug	35-43 cm	42-52 cm	53-63 cm	53-63 cm
<b>D</b>	Zithoogte	46-58 cm	46-58 cm	46-58 cm	46-58 cm
<b>D</b>	Zithoogte met laag onderstel	35-40 cm	35-40 cm	-	-
<b>E</b>	Onderbeenlengte	18-24 cm	22-32 cm	30-40 cm	30-40 cm
<b>F</b>	Totale breedte	45 cm	45 cm	53 cm	53 cm
<b>G</b>	Lengte basisframe	66 cm	66 cm	77 cm	77 cm
	Zithoek	(-)5° - 30°	(-)5° - 30°	(-)5° - 30°	(-)5° - 30°
	Rughoek	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°
	max. belasting	30 kg	30 kg	45 kg	50 kg
	Gewicht	16 kg	17 kg	18 kg	19 kg

## 7. Garantie.

Voor alle producten geldt de wettelijke garantietermijn van twee jaar. Deze begint bij de aflevering of de overdracht van de producten. Wanneer in deze periode aan het door ons geleverde product aantoonbaar een materiaal- of fabricagefout optreedt zullen wij bij vrachtvrije terugzending naar ons, de gereclameerde schade bekijken en eventueel kosteloos en naar ons goeddunken repareren of nieuw leveren.



# 8. Identifizierung.

## 8.1 EG conformiteitsverklaring



**schuchmann®**

### EU Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity



Firma / Company      Schuchmann GmbH & Co. KG  
 Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf · Deutschland / Germany  
 Tel. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Fax +49 (0) 5402 / 40 71 109

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das nachfolgend genannte Produkt der Risikoklasse 1  
*declares under our sole responsibility that the following product(s) of Class 1 Medical Devices*

#### „loeki 2.“ Therapiestuhl / *therapy chair*

Art.-Nr. / *Item-No.*: 73 00 000/NL2x, 73 00 100/NL2x, 73 01 000/NL2x, 73 01 100/NL2x,  
 73 01 200/NL2x, 73 02 000/NL2x

Basis UDI-DI / *Basic UDI-DI*: 4251040200004000730XXXXBQ

den einschlägigen Bestimmungen der im folgenden aufgeführten Richtlinien und Standards entspricht:  
*is / are in conformity with the requirements of the below listed directives and standards:*

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte vom 05. April 2017  
*Regulation (EU) 2017/745 on medical devices of 5 April 2017*

DIN EN 12182:2012      Technische Hilfen für behinderte Menschen  
*Technical aids for disabled persons*

DIN EN ISO 14971:2013      Medizinprodukte - Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte  
*Medical devices - Application of risk management to medical devices*

Diese Konformitätserklärung gilt nur für Produkte mit den oben genannten Artikelnummern und  
 ist gültig bis zum 31.12.2023.

*This declaration of conformity applies only for products with above-named Item-numbers  
 and is valid until 31.12.2023.*

Datum / *Date*:            01.04.2020

Unterschrift / *Sign*:      


Name / *Name*:            Torsten Schuchmann

Funktion / *Function*:      Sicherheitsbeauftragter für Medizinprodukte / *Safety officer for medical devices*

## 8. Identificatie.

### 8.2 Serienummer / Productiedatum

Het serienummer, de productiedatum alsmede verdere informatie vindt u op het typeplaatje dat zich op al onze producten bevindt (**A**).

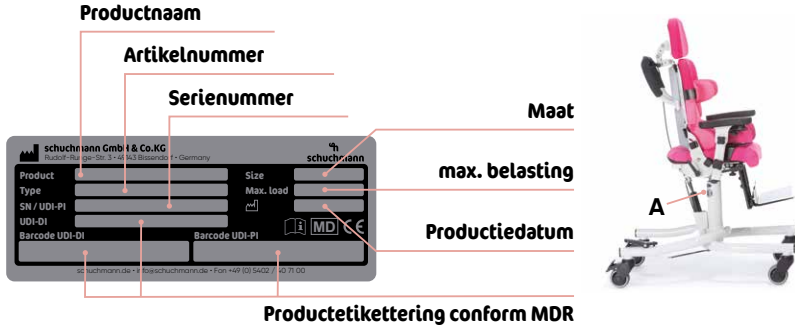

### 8.3 Productversie

De eet-/werkstoel **loeki 2**. is in vier maten verkrijgbaar en kan met verschillend toebehoren worden uitgebreid (zie **punt 4**).

### 8.4 Uitgave van het document

Gebruiksaanwijzing **loeki 2**. - Wijzigingsstand C, uitgave 04-2020

### 8.5 Naam en adres van de producent, uitleverende dealer

Dit product werd geproduceerd door:



#### Schuchmann GmbH & Co. KG

Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf · Duitsland  
Tel. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Fax +49 (0) 5402 / 40 71 109  
info@schuchmann.de · www.schuchmann.de

Dit product werd door de volgende dealer geleverd:



Korte Stukken 7 · 5371 MN Ravenstein · Netherlands  
Tel. +31 (0)486/45 33 44  
info@atlaskidtech.nl · www.atlaskidtech.nl





**schuchmann.de**